

De Ultieme compacte en Opvouwbare scootmobiel



QUEST



Klaar voor gebruik en eenvoudig inklapbaar; de Quest opvouwbare scootmobiel is perfect voor een actieve levensstijl. De Quest levert zowel binnen als buitenshuis goede prestaties, heeft een maximale snelheid van 6,4 km/u en een bereik per lading van maximaal 20 km. De Quest is makkelijk draagbaar en is opgevouwen zeer klein en past daarmee prima in elke kast, hoek, of voertuig. The Quest opvouwbare scootmobiel heeft een strak, stijlvol design, en is zeer eenvoudig te bedienen, alles wat deze scootmobiel uw ideale reispartner maakt!

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

QUEST

Specificaties

S19

Maximale belasting	113 kg
Maximale snelheid ¹	Tot 6,4 km/u
Bodemvrijheid ²	58 mm
Draaicirkel ²	813 mm
Lengte ²	940 mm
Breedte ²	483 mm
Formaat opgevouwen	750 mm x 485 mm x 450 mm
Zithoogte	520 mm
Aandrijfbanden	7" massief
Achterbanden	8" massief
Bereik per laadbeurt ^{1,4}	Tot 20 km
Gewicht zonder accu's ⁵	23,5 kg
Standaard stoel ²	Type: Opvouwbaar, compact, vinyl Material: Grijs vinyl Dimensions: 406 x 330 mm
Aandrijving	4-Pole 270w
Remsysteem	Regeneratief en elektromechanisch
Accu's ³	24V 11.5Ah Li-Polymer / 12V 12AHX 2
Acculader	2.5Amp, 110/240 Volt Li-ION lader
Kleuren	 White Black Red

1. Hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, accu ampère-uur (AH), gesteldheid van de accu(s) en conditie van de banden. Deze specificaties kunnen worden onderworpen aan een variantie van (+/- 10%).
2. Als gevolg van fabricagetoleranties en constante product verbetering, kan deze beschrijving worden onderworpen aan een verschil van (+ of - 3%).
3. Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA , WC Vol2 , paragraaf 4 en ISO 7176-4 normen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen op basis van de accu specificaties en aandrijfsysteem performance test uitgevoerd bij maximale draagvermogen.
4. Accu gewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

LET OP: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De informatie hierin is correct op het moment van publicatie, behouden wij ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Snelheid en het bereik variëren met gewicht van de gebruiker, het type terrein, accu, accu conditie en bandenspanning. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbetering van het product, lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid kan worden onderworpen aan variatie van + of - 3%. Vermelde afmetingen zijn uitsluitend machtsbasis. Totale afmetingen zal variëren op basis van een zit-en accessoire selecties.

Kenmerken

- Uniek opvouwbaar ontwerp
- Opvouwbaar in slechts drie eenvoudige stappen
- Verstelbare stuurkolom
- Tot 20 km bereik per lading
- Eenvoudig te transporteren in hotels, op luchthavens of thuis
- Kan rechtop of liggend worden opgeborgen
- Voor en achter LED-verlichting
- Afmetingen ingeklapt: 762 mm, 483 mm, 457 mm (HxWxD)

Inklappen: Uitvouwen:




Opgevouwen stoel



Trek aan hendel



Trek aan hendel en vouw op

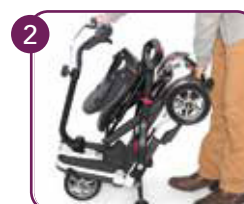

Klap de scootmobiel uit



Vouw op en vergrendel met handvat



Vouw de stoel uit en vergrendel op plek



Opmerking: het transport van dit item op commerciële vluchten is onderworpen aan federale regelgeving en het luchtvaartbeleid. Raadpleeg uw luchtvaartmaatschappij voorafgaand aan uw vlucht om er zeker van te zijn dat uw Quest-scootmobiel en de lithium-ion accu's zijn toegestaan.